



Tökéletes
illeszkedés

a
felülmúlhatatlan
kényelemért

Csúcskategóriás fogsor-alábélelő
termékek a GC-től a személyre szabott
implantációs és kivehető protetikai
megoldásokért

GC

Üdvözzöljük a GC Reline termékcsalád világában

Napjainkban könnyű elveszni a piacon fellelhető fogsor-alábélelő anyagok széles választékában. Látszólag mind ugyanazokkal a tulajdonságokkal és indikációkkal rendelkeznek - valójában azonban mindegyik más. Pedig valójában csak egy egyszerű kérdésre adható egyszerű válasza van szükség: az Ön esetében melyik a megfelelő?

Nos, itt az ideje félresöpörni az aggodalmakat, és tiszta vizet önteni a pohárba.

A GC büszkén mutatja be teljes körű, csúcskategóriás alábélelő anyagainak családját, melyek színvonalas akril- és szilikontechnológiával készültek, és megoldási lehetőségeként szolgálnak páciensei minden igényére, minden indikációs területen.

Bemutatkozik az első "mindent egyben" típusú puha alábélelő - a GC által kínált teljes körű klinikai megoldás.



GC Tissue Conditioner

Puha alábélelő, mely hosszabb ideig marad tiszta ...

Igazi új generációs, világszínvonalú, puhán maradó fogsor-alábélelő, melyet a **GC szabadalmaztatott**. A GC Tissue Conditioner nagyszerű választás, ha hosszú ideig puhán és tisztán maradó anyagot keres. A GC Tissue Conditioner-t kondicionálásra, puha alábélelésre és funkcionális lenyomatvételre is használhatja.

- A **tökéletes konzisztencia és folyékonyág** könnyen alkalmazhatóvá, kényelmessé és időtakarékoská teszi - a szájba illesztés mindössze 5 percet vesz igénybe.
- Egyedülálló, szabadalmaztatott formulája és **speciális bevonata** véd az idő során bekövetkező lekopástól. A **kiváló felületi simaságnak** köszönhetően óriási segítséget nyújt a gyógyuláshoz, és higiéniaiilag is kifogástalan - nincsenek többé kellemetlen szagok!
- Hosszantartó puhasága mellett képes arra is, hogy a nyálkahártya változásaihoz **idomuljon**, így **gyorsítja a gyógyulási folyamatot** és nagyobb komfortérzetet nyújt pácienseinek.

... és a tökéletes illeszkedés érdekében újra és újra felvihető!

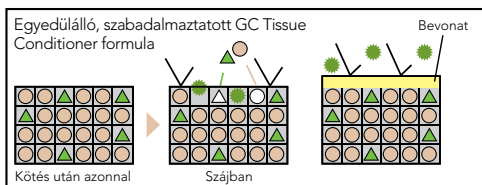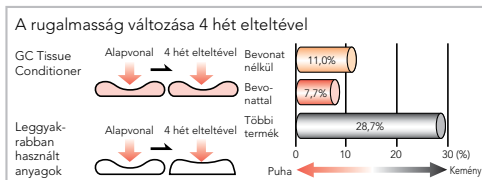

● Plasztizáló anyag

▲ Alkohol

■ Tissue Conditioner

● Különböző anyagok által előidézett kopás

A plasztizáló anyag és az alkohol nehezen távoznak, de az erős konfiguráció még távozásuk esetén is fenntartja az állapotot, és véd az olyan anyagok ellen, melyek előidézhetik a lekopást.

A védő bevonat védelmet nyújt a kopással szemben.



Két különböző színben kapható: élő rózsaszín és fehér



A szakadásokkal szembeni fokozott ellenállásnak köszönhetően kézzel is könnyen eltávolítható

Útmutató a GC R

Nyálkahártya-kondicionálás

Mikor?

- Fogsor által okozott trauma vagy fertőzés miatt **gyulladt nyálkahártya**
- **Protetikai munkákat megelőző** ellátás után azonnal
- Foghúzást követően azonnal, vagy **ideiglenes fogsorok** tervezésekor
- **Implantációs felépítmények** gyógyulási szakaszában

Miért?

- Hosszantartó puhasága révén az anyag idomul a nyálkahártya idővel végbemenő változásaihoz

Hogyan?

- Bélélje alá a fogsort **GC Tissue Conditioner**-rel vagy **GC Reline Extra Soft**-tal néhány napra vagy hétre (a páciensről függően)
- Ezután - a nyálkahártya állapotától függően - használja a GC Reline Soft vagy GC Reline alábélelőket

Klinikai eset GC Tissue Conditioner-rel




A fogsor felszíne alábélelés előtt




Csiszolja meg a széleket és vékonyítsa el az alábélelni kívánt területeket



Bondként használva vigye fel a fedőréteget (opcionális)

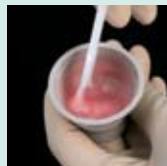

Keverje össze a port és a folyadékot

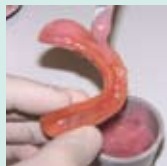

A keverés megkezdésétől számított 30 másodperc elteltével applikálja



Helyezze a szájba a fogsort, és tartsa bent 5 percig



Távolítsa el a szájból



Egy éles eszközzel vágja le a felesleget



Tisztítás után vigye fel a fedőréteget



A kész fogsor



Reline családhoz, mely minden kulcsfor

Puha alábélelés

Mikor?

- **Csontos kidudorodások** a maxilláris vagy mandibuláris íven
- Jelentős **alámenős részek** a gerincen
- Ha a mandibuláris gerinc **széle éles**
- Bármilyen esetben, ha **megnövelt szívóerő** szükséges
- **Implantációs** technikáknál a szövet gyógyulási szakaszát követően

Miért?

- A nagyon vékony és felszívódott mandibuláris gerincek (idősebb pácienseknél gyakori) feletti nyálkahártya is nagyon vékony, és a kemény fogsoralapok könnyen felsérthetők
- A komolyan felszívódott alsó gerinc a fogsor nyomásának jele lehet - ez a terület puha alábélelést igényel majd

Hogyan?

- Bélelje alá a fogsort **GC Reline Soft**-tal vagy **GC Tissue Conditioner**-rel, és vonja be fedőréteggel

Klinikai eset GC Reline Soft-tal



Felszívódás és vékony nyálkahártya



Az alábélelendő terület vékonyítása



Vigye fel a GC Reline Primer-t, majd gyengéden szárítsa le



Vigye fel a GC Reline (Extra) Soft-ot. A munkaidő 23°C-on 2 perc



Egy spatulával oszlasza el a fogsoron



Helyezze a fogsort a szájba, majd funkcionálja. Hagyja így 5 percig



Egy megfelelő eszközzel távolítsa el a felesleget



Finírozza GC Reline szilikoncsúccsal (max. 10.000 fordulat/perc)



Az optimális simaság eléréséhez applikálja a megkevert GC Reline Modifier A-t és B modifikálókat



Alábélelt fogsor



Fontosságú információt tartalmaz

Kemény alábélelés

Mikor?

- Olyan páciensek esetében, akik nem akarnak fogsor nélkül maradni, míg az alábélelés a laboratóriumban elkészül
- Puha alábélelést vagy a nyálkahártya kondicionálását követően, amikor a páciens szájnyálkahártyája már valóban meggyógyult

Miért?

- A laza, nyálkahártyán traumát nem okozó fogsorok rendelői ellátása különösen egyszerű
- A páciens mindössze néhány percent belül kiváló, pontos illeszkedéssel kapja vissza eredeti fogsorát

Hogyan?

- Bélelje alá a teljes vagy részleges fogsort **GC Reline**-nal

Klinikai eset GC Reline-nal



Részleges, rendelőben alábélelendő fogsor



Érdesítse az alábélelendő területeket



Vigyen fel Bonding agent-et a felszínre



Egyenletesen terítse szét a keveréket



A keverés megkezdésétől számított 1 perc elteltével helyezze a részleges fogsort a szájba. Igazítsa be a széleket.



Vegye ki a szájból, amikor az anyag elérte a gumiszzerű állapotot (a keverés megkezdésétől számított 2 - 2 és fél perc elteltével). Távolítsa el a felesleget, majd - még mielőtt a hőfejődés megkezdődne - helyezze vissza a szájba.



A keverés kezdetétől számított kb. 5 és fél perc elteltével vegye ki a szájból, és kezdje meg a fűrésszel történő finirozást



Polírozza szilikoncsúccsal



Alábélelt részleges fogsor

Implantológia

Mikor?

- Részleges fogsoroknál (1-3 tagú), az implantátum beültetése után
- Foghúzás utáni ideiglenes pótláskor a gyógyulás elősegítésére az implantátum beültetését megelőzően
- Csontaugmentációt követően
- Implantátum beültetését követően a teljes fogsor alábélelésére

Miért?

- A beavatkozás után a protézis jobb rögzülése érdekében
- A fájdalom csökkentése azért, hogy az okkluzális nyomást egyenletesen oszlatja el a nyálkahártya fogszorral érintkező teherviselő területén
- Esztétikai céllal, főként anterior területen
- Az implantátum oldalán fellépő erős nyomás elkerülésére

Klinikai eset GC Tissue Conditioner-rel



Az implantátum beültetése után nyálkahártya-kondicionálás szükséges



Alábélelendő részleges fogsor



Az alábélelt részleges fogsor funkciót és esztétikumot biztosít a gyógyulási idő alatt

Dr. F. Slotboom,
Hollandia

Hogyan?

1. Kétlépéses technika süllyesztett implantátumok és foghúzás utáni ideiglenes fogsorok esetén

Először kondicionálja a nyálkahártyát **GC Tissue Conditioner**-rel vagy **GC Reline Extra Soft**-tal 30-45 perccel a beavatkozás után. Hagyja így 2-3 hétig. Ezt **GC Tissue Conditioner** vagy **GC Reline Soft** puha alábélelés kövesse 3 héttől 1 hónapig terjedő időtartamra. **GC Reline**-nal fejezze be a kezelést.

2. Egylépéses technika implantátumok gyógyulási csavarjai körül, az íny záródásának elősegítésére

A beavatkozás után 30-45 perccel kondicionálja a nyálkahártyát **GC Tissue Conditioner**-rel vagy **GC Reline Extra Soft**-tal. Hagyja így 2-3 hétig. A kezelés utolsó szakaszában készítsen puha alábélelést **GC Reline Soft**-tal vagy **GC Tissue Conditioner**-rel.

3. Kis fogatlan poszterior területek esetén lehetőleg ne készítsen kivethető ideiglenes pótlást (feltéve, hogy páciense is egyetért). Az ilyen eset ideális puha direkt alábélelésre.

Ideális esetben nincs szükség a nyálkahártya kondicionálására. Ehelyett 3 hét várakozási idő elteltével készítsen direkt alábélelést valamilyen puha alábélelő anyaggal, pl. **GC Reline Soft**-tal vagy **GC Tissue Conditioner**-rel. 3 hét elteltével készítsen kemény alábélelést **GC Reline**-nal.

GC Reline Soft & GC Reline Extra Soft

Azonnal használható, ideiglenes, puha, szilikonbázisú fogsor-alábélelők ...

Az olyan klasszikus indikációk, mint az érzékeny nyálkahártya, éles vagy csontos alveoláris gerinc, vagy az alámenő részek fokozott figyelmet igényelnek. A GC emiatt kétféle terméket is kínál: a **GC Reline Soft**-ot és a **GC Reline Extra Soft**-ot.

A két rendszer tulajdonságai:

- A patronos kiszerezésű vinil polisziloxán anyag **közvetlen kiadagolása egyszerű**
- Az anyag felszíne az idő múlásával is **sima és tiszta** marad
- Rendelőben és laboratóriumban történő használatra

Részletek a GC Reline Soft-ról

- Segít a **sorvadási** folyamat **kompenzálásában**
- Rugalmas: kipárnázza a fogsor és a szájnyálkahártya közötti részt, így csillapítja a rágónyomást, és megoldja az anatómiai eredetű problémákat

Részletek a GC Reline Extra Soft-ról

- **Különlegesen lágy** konzisztenciájának köszönhetően elősegíti a sebgyógyulást
- **Normalizálja az irritált nyálkahártya állapotát**, mielőtt új fogsort, alábélelést vagy alapot készítene

Sőt, a GC Reline Soft és Extra Soft előnyeit az implantátumra ültetett fogsorok esetében klinikai tesztek is igazolták.

... az idő múlásával is megőrzi rugalmasságát, így a tökéletes illeszkedés garantált!



GC Reline

A modern, keményen maradó fogsor-alábélelő ...

Az olyan egyszerű problémák, mint pl. egy rosszul illeszkedő fogsor, mely nyálkahártya-traumát nem okoz, egyszerű, egy lépéses megoldást igényelnek. Pontosan ez az, amit a GC Reline nyújt.

Közelebbről:

- **Metilmetakrilát-mentes** - nincs kellemetlen szag, kisebb az allergia kockázata
- **Maximum 40°C-os kötési hőmérsékletéből** eredően nem irritálja a nyálkahártyát
- **Kivételes konzisztenciája** tökéletes anatómiai illeszkedést biztosít
- Hihetetlenül pontos, az eltávolításkor fellépő **torzulás veszélye pedig minimális**

- Páciensei **kevesebb időt tölthetnek a székben**, mivel a keverés kezdetétől számított 5½ perc elteltével már a finírozást és polírozást végezheti
- **Jó adhézió** a fogsor és a GC Reline között
- Székben történő rendelői és laboratóriumi felhasználásra is alkalmas

... kivételes konzisztenciával a könnyen elérhető tökéletes illeszkedésért!



Dr. J. P. Capet, Franciaország



GC Tissue Conditioner

1-1 csomag

- 90 g por
- 90 g (101 ml) folyadék
- 15 ml lakk
- Műanyag spatula
- Gumicsésze a keveréshez
- Folyadékadagoló fecskendő
- Pormérő edény
- Ecset No. 7

Utántöltők

- 90 g por
- 90 g (101 ml) folyadék
- 15 ml lakk



Intro csomag

- 62 g (48 ml) patronos Soft vagy 56 g (48 ml) patronos Extra Soft
- 6 univerzális keverőcsőr II, L méret (kék)
- 12 g (13 ml) Reline Primer
- A és B modifikáló 9-9 ml
- Finírozó csúcs
- Finírozó korong
- Tartozékok: Ecset no. 7, műanyag spatula, keverőtömb, szivacs, műanyag spatula no. 1, műanyag tartó

Utántöltők

- 62 g (48 ml) Reline Soft patron
- 56 g (48 ml) Reline Extra Soft patron
- 12 g (13 ml) Reline Primer
- Reline modifikáló, 1-1 csomag, egyenként 10 g (9 ml) A és B, keverőtömb (no. 15), szivacs
- Reline finírozó csúcs, 3 db
- Reline finírozó korong, 12 db
- Patron adagoló II, 1 db
- Univerzális keverőcsőr II, L méret (kék), 60 db



GC Reline

Standard csomag

- 80 g por
- 50 ml (50 g) folyadék
- 15 g bondanyag
- Keverőcsésze
- Pormérő edény
- Folyadékmérő edény

Utántöltők

- 80 g por
- 50 ml (50 g) folyadék
- 15 g bondanyag

Forrás:

JAGGER D C, HARRISON A. Complete dentures: The soft option: An update for general dental practice. Br Dent J 1997; 182: 313-317.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

GC EEO - Hungary
Etele út 65.
H - 1119 Budapest
Tel.: +36.1.205.36.02
Fax.: +36.1.205.36.03
hungary@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

